




**“Decidí tratarme con Rezūm porque vi que los fármacos y algunas intervenciones quirúrgicas tenían efectos secundarios que no quería padecer.”**

*– Tim, paciente tratado con Rezūm*

Las respuestas pueden y suelen variar de un paciente a otro.



**La terapia con vapor de agua Rezūm** es una intervención corta, que se hace en el consultorio y emplea la energía natural almacenada en el vapor de agua para reducir la próstata agrandada.<sup>1,2</sup>

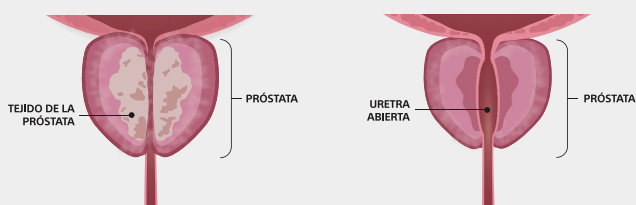

#### **Antes**

El agrandamiento de la próstata puede comprimir la uretra y dificultar el paso de la orina que proviene de la vejiga.

#### **Después**

Luego del tratamiento con la terapia Rezūm, el cuerpo se sana y el tejido extra desaparece, la uretra se abre y la orina fluye libremente.

Esta imagen es solamente para fines ilustrativos. No está destinada a explicar su eficacia.

La terapia Rezūm, por lo general, se hace directamente en el consultorio del urólogo o en un centro de cirugía ambulatoria.

Durante cada tratamiento de 9 segundos, se libera vapor de agua estéril por todo el tejido prostático selectivo. La cantidad de tratamientos que deba hacerse varía según el tamaño de la próstata.

Con el tiempo, la respuesta de curación natural del cuerpo absorbe el tejido tratado y achica la próstata. Al extraer el tejido extra, la uretra se abre, por lo que se reducen los síntomas de la hiperplasia benigna de próstata (HBP).

La mayoría de los pacientes comienzan a sentir un alivio de los síntomas tan solo dos semanas después del tratamiento, y el beneficio máximo puede presentarse a los tres meses.<sup>\*1,2</sup>

*Las respuestas pueden y suelen variar de un paciente a otro.*

## ¿Por qué elegir la terapia con vapor de agua Rezūm?

Si tiene HBP, la terapia Rezūm ofrece varias ventajas.



Se evitan los medicamentos para la HBP y sus efectos secundarios<sup>3</sup>



Los estudios clínicos demuestran que la terapia Rezūm alivia los síntomas de manera segura y eficaz<sup>1,2</sup>



La mayoría de los pacientes ven una mejoría de los síntomas en dos semanas<sup>\*1,2</sup>



Terapia ambulatoria o en el consultorio<sup>1</sup>



No requiere anestesia general<sup>1</sup>



Conserva la función sexual<sup>1</sup>



Se pueden retomar las actividades habituales en unos pocos días<sup>\*1,2</sup>



Alivio de los síntomas que perdura<sup>1</sup>



No es un implante permanente



Aprobado por la FDA; incluido en las recomendaciones de la Asociación Urológica Estadounidense

## ¿Busca un alivio duradero para los síntomas de la HBP?



¿Se despierta a toda hora para orinar?



¿Tiene urgencias urinarias?



¿Tiene un chorro débil?



¿Tiene efectos secundarios de los medicamentos para la HBP?

## ¿Y si hubiera una forma mejor de atacar la causa de su HBP y experimentar un alivio considerable y duradero?

La terapia con vapor de agua Rezūm trata el origen de la hiperplasia benigna de próstata (HBP): el agrandamiento de la próstata. Esta intervención corta que se hace en el consultorio emplea la energía natural almacenada en unas pocas gotas de agua para reducir el tamaño de la próstata. En consecuencia, la orina puede fluir libremente. Sin incisiones, sin anestesia general y la mayoría de los pacientes regresan a sus actividades habituales en unos pocos días.\* Además, conserva la función sexual.<sup>1,2</sup>

**Rezūm le permite vivir su vida al máximo.**

**¿Por qué esperar?**



# Ve a un video sobre la HBP y la terapia Rezūm

Siga estos sencillos pasos:



- 1 Abra la aplicación de la cámara de su teléfono
- 2 Apunte la cámara hacia el código QR, y el teléfono lo reconocerá
- 3 Toque la alerta en la parte superior de la pantalla para reproducir el video

Es posible que algunos teléfonos no tengan la función de lectura de código QR con la cámara. Escriba **Rezūm.com/VideoSP** en su navegador para ver el video.

**Para obtener más información sobre la terapia Rezūm y cómo puede reducir los síntomas de la HBP de manera segura y eficaz, visite [Rezūm.com](http://Rezūm.com).**

Todos los tratamientos suponen riesgos inherentes y asociados. El sistema Rezūm está diseñado para aliviar síntomas y obstrucciones, y para reducir el tejido prostático asociado a la HBP. Está indicado para hombres  $\geq 50$  años con un volumen de próstata de  $30 \text{ cm}^3 \leq 80 \text{ cm}^3$ . El sistema Rezūm también está indicado para el tratamiento de próstata con hiperplasia en la zona central o en un lóbulo medio. Los riesgos incluyen, entre otros, dolor al orinar (disuria), sangre en la orina (hematuria), sangre en el semen (hematospermia), disminución del volumen eyaculatorio, sospecha de infección de las vías urinarias (IVU) y frecuencia de micción, de retención o de urgencia urinaria. Debe hablar con su médico sobre las ventajas y los riesgos antes de optar por un tratamiento.

#### REFERENCIAS Y DESCARGOS

\*Depende de la situación clínica individual y de la respuesta de curación.

1. McVary KT, Rogers T, Roehrborn CG. Rezūm water vapor thermal therapy for lower urinary tract symptoms associated with benign prostatic hyperplasia: 4-year results from randomized controlled study. *Urology*. 2019 Apr;126:171-9.
2. McVary KT, Gange SN, Gittelman MC, et al. Minimally invasive prostate convective water vapor energy (WAVE) ablation: A multicenter, randomized, controlled study for the treatment of lower urinary tract symptoms secondary to benign prostatic hyperplasia. *J Urol*. 2016 May;195(5):1529-38.
3. Roger K, Gilling P. *Fast Facts: Benign Prostatic Hyperplasia*, 7th edition. Health Press. 2011.

Precaución: Las leyes federales de los EE. UU. solo permiten la venta de este producto a médicos o bajo prescripción facultativa.

Los resultados de estudios de casos no son necesariamente predictivos de los resultados en otros casos. Los resultados en otros casos pueden variar.

La recuperación individual varía. Es posible que la experiencia no sea representativa de todos los casos. Boston Scientific compensó a los pacientes por su tiempo.

La información que se incluye en este folleto se proporciona solo con fines informativos y no constituye un consejo médico ni debe usarse para obtener diagnósticos médicos. Boston Scientific le recomienda enfáticamente que consulte a su médico sobre todas las cuestiones relacionadas con su salud o para que responda las preguntas médicas que pueda tener.

Todas las imágenes son propiedad de Boston Scientific. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

Rezūm.com es un sitio web patrocinado por Boston Scientific.

©2020 Boston Scientific Corporation or its affiliates.  
All rights reserved. URO-5628055-AB AUG 2020

**Boston  
Scientific**

Advancing science for life™

**Boston Scientific Corporation**  
300 Boston Scientific Way,  
Marlborough, MA 01752

[bostonscientific.com](http://bostonscientific.com)

EL CONTENIDO ES PROVISTO POR BOSTON SCIENTIFIC. BOSTON SCIENTIFIC SE DEDICA A TRANSFORMAR VIDAS MEDIANTE SOLUCIONES MÉDICAS INNOVADORAS QUE MEJORAN LA SALUD DE LOS PACIENTES EN TODO EL MUNDO.

**Rezūm™**  
Water Vapor Therapy

**Boston  
Scientific**  
Advancing science for life™



**Noches con Rezūm  
sin interrupciones  
para ir al baño.**



La terapia con vapor de agua Rezūm™ es una alternativa natural a la cirugía. Trata la causa de la HBP, para que usted pueda volver a su vida.